

VERTEX™ VIBRATION STICK ROLLER

INSTRUCTION BOOKLET AND SAFETY INFORMATION

SR-STK

FIND MORE HELP ONLINE

Visit the URL to the right to find how-to photos, usage tips, and additional information about this product.



www.homedics.com/vertex

INSTRUCTIONS FOR USE

- Remove the battery cover by turning to the unlock position. Insert 2 “C” batteries (not included) into the compartment (Fig. 1). Replace the cover and turn to the lock position.
- Press the power button once to activate the massager (Fig. 2).
- Roll the massager over the desired area.
- After completing your massage, press the power button again to turn the massager off.



FIG 1

TO CLEAN

Clean only with a soft fabric cloth. Never allow water or other liquids to come into contact with this unit.

- Do not immerse in any liquid to clean.
- Never use abrasive cleaners, brushes, gasoline, kerosene, glass/furniture polish, or paint thinner to clean.



FIG 2

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WHEN USING THIS APPLIANCE, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

- This product is not intended for medical use.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by HoMedics, specifically any attachments not provided with the unit.
- Do not place or store appliance where it can fall or be dropped into a tub or sink.
- Do not place or drop into water or any other liquid.
- Not for use by children.
- Turn off appliance when not in use.
- Never operate this appliance if it has been damaged or if it is not working properly. Return it to the HoMedics service center for examination and repair.
- Keep away from heated surfaces.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CAUTION: PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING.

- If you have concerns regarding your health, consult your doctor before using this product.
- Those with the following conditions should consult their doctor before using this product.
 - Pregnancy
 - Malignant tumor
 - Diabetes
 - Conditions requiring rest
 - Heart disease
 - Pacemakers
- If at any time soreness, rash, or pain occurs, discontinue use and consult your physician.
- NEVER use this product directly on swollen or inflamed areas, skin eruptions, or an open wound.
- A massage session longer than 20 minutes is not recommended.

Attention California Residents:

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, and other reproductive harm.

BATTERY PRECAUTIONS

- Use only the size and type of batteries specified.
- When installing batteries, observe proper +/- polarities. Incorrect installation of batteries may cause damage to the unit.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.
- Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.
- If the unit is not going to be used for a long period of time, remove batteries to prevent damage due to possible battery leakage.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Remove depleted batteries promptly.
- Dispose of properly in accordance with all state, province, and country regulations.

This product contains small parts that may present a choking hazard for young children.

Caution: All servicing of this massager must be performed by authorized HoMedics Service Personnel only.

2 YEAR LIMITED WARRANTY

For detailed warranty instructions and information, visit: http://media.homedics.com/warranty/warranty_2yr.pdf

For service in the USA

Email: cservice@homedics.com
Tel: 1.800.466.3342, M-F 8:30am-7:00pm EST

For service in Canada

Email: cservice@homedicsgroup.ca
Tel: 1.888.225.7378, M-F 8:30am-5:00pm EST

ENCUENTRE MÁS AYUDA EN LÍNEA

Visite la URL que está a la derecha para ver fotos del procedimiento, consejos de uso e información adicional acerca de este producto.



www.homedics.com/vertex

INSTRUCCIONES DE USO

- Retire la cubierta de las baterías girando a la posición abierta. Coloque 2 baterías "C" (no incluidas) en el compartimiento (Fig. 1). Vuelva a colocar la cubierta y gire a la posición cerrada.
- Presione el botón de encendido una vez para activar el masajeador (Fig. 2).
- Haga rodar el masajeador sobre el área deseada.
- Luego de terminar el masaje, presione el botón de encendido de nuevo para apagar el masajeador.

FIG 1


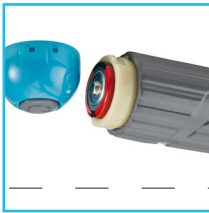


FIG 2

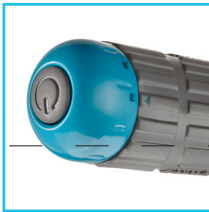

Limpie únicamente con un paño suave. Nunca permita que esta unidad entre en contacto con agua u otros líquidos. No sumerja la unidad en ningún líquido para limpiarla. Nunca utilice limpiadores abrasivos, cepillos, gasolina, querosén, limpiador de vidrios o lustramuebles ni diluyente de pintura para limpiar.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CON ATENCIÓN ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO. Si usted tiene cualquier preocupación en referencia a su salud, consulte a su médico antes de usar este producto. Los individuos con las siguientes condiciones deben consultar a su médico antes de usar este producto:

- Embarazo
- Urticaria
- Entumecimiento del corazón
- Marcapasos
- Si en algún momento tiene sarpullido o dolor, suspenda el uso y consulte a su médico.
- NUNCA use este producto directamente sobre áreas hinchadas o inflamadas, ni sobre erupciones cutáneas ni heridas abiertas. No se recomienda una sesión de masajes de más de 20 minutos de duración.
- Atención a los residentes de California: Este producto contiene sustancias químicas que causan cáncer, defectos congénitos y otros daños reproductivos.

PRECAUCIONES SOBRE LAS BATERÍAS

- Use únicamente el tamaño y tipo de baterías especificado.
- Cuando coloque las baterías, tenga en cuenta las polaridades adecuadas +/-; Si coloca las baterías de manera incorrecta, se puede dañar la unidad.
- No mezcle baterías usadas y baterías nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbon-zinc) ni recargables (níquel-cadmio, níquel-metal hidruro, etc.).
- No arroje las baterías al fuego, pueden explotar o perder líquido.
- Si la unidad no se va a usar durante un período prolongado, retire las baterías para evitar daños debido a posibles pérdidas de las baterías.
- Limpie los contactos de las baterías y los del dispositivo antes de colocar las baterías.
- Retire las baterías agotadas rápidamente.
- Deséchelas de forma adecuada de acuerdo con todas las regulaciones estatales, provinciales y del país.

Este producto contiene piezas pequeñas que pueden constituir un riesgo de asfixia para los niños pequeños. GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

Para obtener información e instrucciones detalladas sobre la garantía, visite: http://media.homedics.com/warranty/warranty_2yr.pdf

Para obtener servicio en EE. UU.

Correo electrónico: cservice@homedics.com

Teléfono: 1.800.466.3342, de lunes a viernes

de 8:30 a.m. a 7:00 p.m. (hora del Este)

Teléfono:

de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. (hora del Este)

Para obtener servicio en Canadá

Correo electrónico: cservice@homedicsgroup.ca